


MalleoTrain® Plus

Chevillère active pour une stabilité et une sécurité accrue de la cheville.



Système de sangles semi-élastiques appliqué en forme de 8

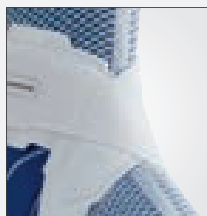

Indications


- Irritations chroniques, post-traumatiques ou post-opératoires des tissus mous au niveau de l'articulation de la cheville
- Thérapie fonctionnelle précoce des elongations ligamentaires
- Insuffisance ligamentaire
- Prophylaxie de la supination, en particulier dans le cadre d'activités sportives
- Rééducation post-opératoire

Caractéristiques

- Chevillère active avec les qualités d'un bandage adhésif fonctionnel pour la cheville.
- Stabilisation de tous les niveaux de mouvement de la cheville grâce à un système de sangle à trois niveaux d'élasticité (élastique, non élastique, semi-élastique).
- Sangle reliant le métatarse à la région distale du mollet en forme d'un huit vertical.

Mode d'action

- MalleoTrain Plus agit de la même manière que les bandages adhésifs fonctionnels.
- Le renforcement du stimulus de la peau améliore le contrôle inconscient du mouvement au niveau de la cheville lors de chaque mouvement (proprioception).
- La tension de la sangle est réglable individuellement et ceci sans limiter les mouvements normaux.
- Les pelotes, qui sont intégrées médialement et latéralement, sont étroitement entourées par la sangle en forme de huit, et permettent ainsi encore plus de stabilité.
- MalleoTrain Plus démontre toutes ses qualités dans la prévention des blessures et dans la réhabilitation d'articulations déjà blessées préalablement.

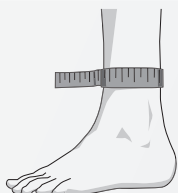

Taille	1	2	3	4	5	6	Référence
Tour de la cheville en cm	17-19	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29	11011120080+0°

+6 = droit, +7 = gauche, ° = taille