

NOUVEAU Spinova® Immo Plus

Orthèse multifonctionnelle pour une stabilisation dorso-lombaire et sacro-lombaire avec fonction mobilisatrice.



Système à coque



Indications

- Spondylolyse / spondylolisthèse
- Syndrome facettaire avec hypermobilité/spondylite
- Spondylarthrose
- Syndrome lombaire (pseudo) radiculaire très avancé / ischialgie lombaire très avancée
- Sténoses lombaires du canal rachidien avec parèses (traitement conservateur, postop.)
- Sténoses foraminales, latérales
- Fractures (colonne vertébrale lombaire), de grande ampleur, soulagement du bord vertébral antérieur et/ou bord postérieur des vertèbres
- Tumeurs (métastases)
- Dégénérescence grave / forte insuffisance musculaire de la colonne
- Après un prolapsus (traitement conservateur, post-opératoire)
- Dissectomie
- Post-opératoire, une journée / plusieurs (spondylodèse / cyphoplastie p. ex.)
- Ostéochondrose


Caractéristiques

- Fermeture à boucle du système de sangles de traction permettant un dosage simple de la force de stabilisation requise pour le traitement.
- Ajustement de la hauteur des points d'application de la force de stabilisation en fonction de l'effet recherché : augmentation ou diminution de la lordose, stabilisation simple.

- Les demi-coques en plastique de forme anatomique peuvent être ajustées selon la circonférence et la forme du bassin du patient.
- Possibilité de retirer les renforts aluminium de la cassette dorsale afin d'augmenter la mobilisation.
- Le tricot Spinova aéré de la ceinture permet un ajustement anatomique précis pour un confort parfait.
- La fermeture abdominale auto-agrippante permet une adaptation rapide et facile.
- Ouverture et fermeture faciles de l'orthèse grâce à de grands passants sur la fermeture abdominale.
- Le bord souple de la fermeture abdominale permet un grand confort même en position assise !
- La mise en place du Spinova est très simple pour le patient grâce à la fermeture « velcro » du corset et à la fermeture à boucle du système de traction-renvoi double qui permet de garder la même pression après chaque ouverture et fermeture du corset.

Mode d'action

- La colonne vertébrale est stabilisée et soulagée grâce au système de sangles de traction Spinova associé à la coque en matière synthétique.

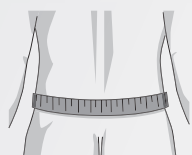


Taille	1	2	3	4	5	6	Référence
Tour de hanches en cm	70-80	80-90	90-105	105-115	115-125	125-140	1228541100000°
°= taille							

Multifonctionnalité

- La construction modulaire de la Spinova Immo Plus permet une thérapie contrôlée selon un schéma de traitement à trois niveaux adaptables individuellement.


- **Niveau 1 : (phase de stabilisation)**

L'orthèse est employée avec la coque pour sécuriser efficacement les segments (traitement post-opératoire ou initialement conservateur)

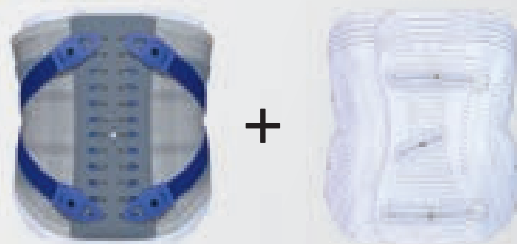


- **Niveau 2 : (phase de mobilisation)**

La coque est retirée afin d'augmenter la mobilisation suivant les progrès de la convalescence. Les baleines du corset et les renforts aluminium de la cassette dorsale Spinova continuent à garantir un soutien adapté à l'évolution du traitement.

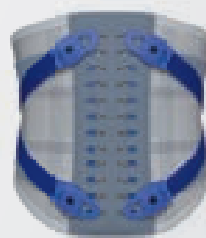

- **Niveau 3 : (phase de mobilité)**

Pour augmenter la mobilité, les renforts aluminium sont retirés de la cassette dorsale. Les baleines intégrées au corset garantissent un soutien externe.

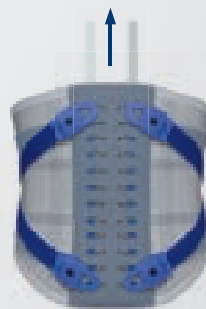

- Repasser du niveau 3 ou du niveau 2 au niveau 1 d'utilisation du Spinova Immo Plus est toujours possible.